


Käsien ja jalkojen kuntoutuslaite, käyttö ja asennusohje

Asennus

1. aseta jalat (2) poljinosaan (1)
2. kiristä säätöruuvit, prikot ja mutterit (5, 6 ja 7) avaimella 7.
3. kierrä nuppi (4) poljinosaan (1)
4. paina kumiset tulpat (3) jalkoihin (2)

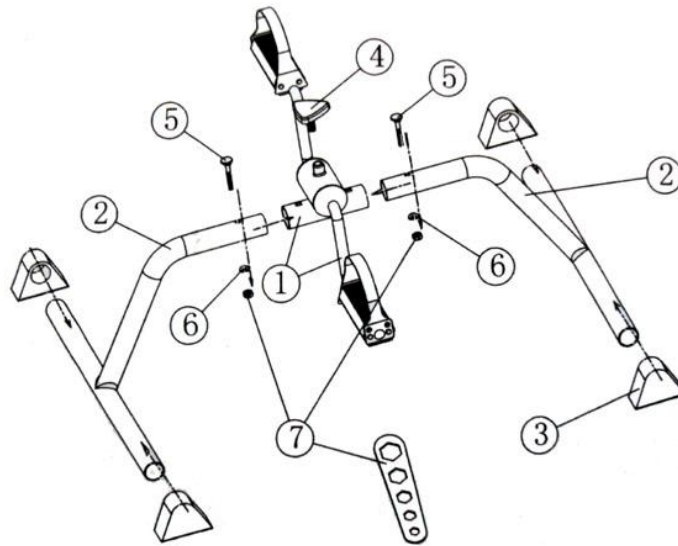

Käyttö

Ennen käyttöä varmista, että laite on tukeva ja kasattu oikein. Kuntoutuslaitetta poljetaan istuma-asennossa. Älä seiso polkimilla! Säädä polkimen vastusta nupilla 4.

Yhteystiedot

Linctus Oy, Turuntie 4-6, 13130 Hämeenlinna, www.linctus.fi