



Ref.: LTG-275

Lumbitron® Elite

Valmistuspäivä sisältyy eränumeroon, joka näkyy **LOT** etiketissä seuraavasti: Toinen ja kolmas numero edustavat valmistusvuotta, ja neljäs ja viides numero edustavat kuukautta.

KÄYTTÖOHJEET, SÄILYTYS JA TAKUU

Hyvä asiakas, Paljon kiitoksia siitä, että luotat Orlimanin tuotteeseen. Lue ohjeet huolellisesti. Pidä nämä ohjeet ja pakkaus myöhemmää tarvetta varten. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, ota yhteyttä lääkärisi, ortopedian erikoislääkärisi tai asiakaspalveluosastomme. ORLIMAN S.L.U. takaa kaikki tuotteensa, kunhan alkuperäistä tuotetta ei ole muutettu lukuun ottamatta tässä ohjeessa kuvattua käyttötarkoitusta. Jos tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden, varaosien tai järjestelmien kanssa, varmista, että ne ovat yhteensopiva ja Orlimanin® valmistama. Se ei takaa tuotteita, joiden ominaisuudet ovat muuttuneet väärän käytön, vikojen tai minkäänlaisen rikkoutumisen vuoksi. Ostomaan lakisääteiset määräykset ovat voimassa. Ota ensin yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet hankkinut tuotteen suoraan, jos kyseessä on mahdollinen vaatimus takuu. Jos tuotteeseen liittyy vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Orliman S.L.U.:lle ja vastaaville oman maasi toimivaltainen viranomainen. Orliman haluaa kiittää sinua tämän tuotteen valinnasta ja toivoo nopeaa paranemista.

ASETUS **MD**

Tämä artikkeli on määritelty luokan I lääkinälliseksi laitteeksi. Riskianalyysi (UNE EN ISO 14971) on tehty olemassa olevien riskien minimoimiseksi. Testit on tehty eurooppalaisen UNE-EN ISO 22523 -asetuksen mukaisesti proteeseista ja ortooseista.

KÄYTTÖAIHEET

A-Lumbosacral Back -tuki: Lumbago, lumbosciatica, heikot ja atonisat lihakset, tyrä, leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito.

B-Dorsolumbarin selkätuki: Dorsalgia, degeneratiiviset prosessit, kyfoosi, osteoporoosi, murtuneet nikamat, leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito. *Tarvittaessa voidaan käyttää lisänä vatsatukea

ASENNUSOHJEET

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ottaen huomioon erilaiset yksilölliset tekijät ja tuotteen käyttöä pidettäväksi on tärkeää valita oikea koko jokaiselle potilaalle tai käyttäjälle. Liiallinen puristus voi olla sietämätöntä; puristuksen on suositeltavaa olla jämäkkä mutta mukava. Jos valmistetta on muokattava, ortopedian erikoislääkärin tai terveydenhuollon on tehtävä tällaiset säädöt tai ammattilainen, jolla on laillinen todistus tehdä niin ja jonka on varmistettava, että loppukäyttäjä tai henkilö, joka on vastuussa tuotteesta ymmärtää, miten se toimii ja miten sitä tulisi käyttää.

Kun asennat tuotetta, sinun on noudatettava seuraavia ohjeita:

Selkätuen asennus:

· Kiedo tuki vartalon ympärille niin, että pehmeä leveä tuki on keskellä takana.

· Aseta sormesi kiinnittimien oikean ja vasemman osan vastaaviin pidikkeisiin.

· Paina vatsaa kiinnittimen vasemmalla puolella ja vedä oikealta, kunnes tarra voidaan kiinnittää.

Erillisen lisävyön asennus:

· Aseta lisäosan keskilevy selkätukeen.

· Kun olet kiinnittänyt lisäosan, aseta sormesi joustavien hihnojen molempiin päihin.

· Vedä niin paljon kuin on tarpeen ja kiinnitä tarra vatsan alueelle.



VAROTOIMET

Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki tuotekomponentit ovat asennusprosessin mukaisesti. Tarkista tuote säännöllisesti. Jos havaitset vikoja tai poikkeamia, ilmoita siitä välittömästi myöntävälle laitokselle. Tämä tuote on valmistettu palavasta materiaalista. Älä altista tuotteita tilanteille, jotka voivat sytyttää ne tuleen. Tulipalon sattuessa, ota tuote nopeasti pois kehostasi ja käytä asianmukaisia resursseja tulipalon sammuttamiseen. Hikoilun aiheuttaman epämukavuuden välttämiseksi suosittelemme käyttämään jonkinlaista puuvillakangasta ihon erottamiseen kosketuksesta tuotemateriaalin kanssa. Tuotteen aiheuttaessa hankausta, ärsytystä ja turvotusta, poista tuote ja ota yhteys lääkäriin tai ortopediseen erikoislääkäriin. Valmistetta saa käyttää vain terveellä iholla. Sitä ei suositella käytettäväksi avointen arpien päällä, joissa on turvotusta, punoitusta tai hotspot-alueita.



-symbolilla merkityt tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia ja voivat aiheuttaa allergisia reaktioita lateksiin herkistyneillä.



-tunnuksella merkityt tuotteet sisältävät ferromagneettisia komponentteja, ja siksi on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta magneettikuvauksessa tai kun altistut diagnostisiin tai terapeuttisiin toimenpiteisiin liittyvälle säteilylle.

SUOSITUKSET-VAROITUKSET

Näiden tuotteiden käyttöä säätelevät käyttöaiheet. Vaikka tuotetta ei ole määritelty kertakäyttöiseksi laitteeksi, sen käyttöä vain yhdellä potilaalla suositellaan ja vain näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoitettuihin tarkoituksiin tai terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Kun hävität tuotteen ja sen pakkauksen, sinun on noudatettava tiukasti yhteisön lakeja.


SÄILYTYSTÄ JA PESUA KOSKEVAT SUOSITUKSET

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Kiinnitä tarranauhat toisiinsa (jos ortotoottisessa laitteessa on ne). Pestään usein käsin lämpimällä vedellä (enintään 30 ° C) ja miedolla saippualla. Kuivaamiseen käytä kuivaa pyyhettä imeäksesi mahdollisimman paljon kosteutta ja anna kuivua huoneenlämmössä. Älä ripusta tai silitä tuotetta. Älä altista sitä suorille lämmönlähteille, kuten uunille, kuivausrummulle, suoralle auringolle jne. Kun käytät tai puhdistat tuotetta, älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita, alkoholia, voiteita tai nestemäisiä liuottimia. Jos pesuainejäämää ei kuivata kunnolla, se voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa tuotteen huononemisen.



Asennusohjeet

Selkätuen asennus

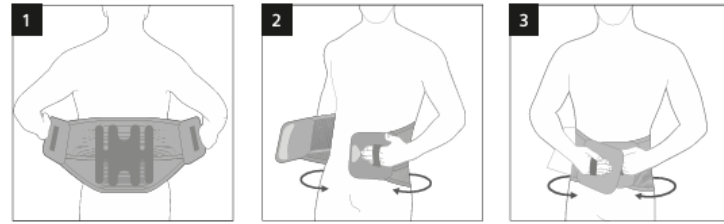

Erillisen lisävyön asennus

